



ANALYZÁTOR STABILITY

TURBISCAN LAB

Svetový referenčný analyzátor stability TURBISCAN LAB umožňuje rýchlú a citlivú identifikáciu mechanizmov destabilizácie (krémovanie, sedimentácia, flokulácia, koalescencia a ďalšie). Meracia bunka s riadenou teplotou umožňuje buď monitorovanie stability pri konkrétnych teplotách skladovania, alebo urýchlenie procesu destabilizácie zvýšením teploty až na 60 °C.

Prístroj TURBISCAN LAB sa môže používať v laboratóriách výskumu a vývoja aj v laboratóriách kontroly kvality na vývoj a rutinnú kontrolu surovín a formulácií konečných produktov. Technológia TURBISCAN nielenže zisťuje vývoj stability v počiatočnom štádiu (až 1 000-krát rýchlejšie v porovnaní s vizuálnym testovaním), ale aj kvantifikuje globálnu zmenu receptúry pomocou stupnice Turbiscan Stability Index (TSI).

* Obrázok ukazuje nový dizajn produktu - k dispozícii od apríla 2024



ANALYZÁTOR STABILITY TURBISCAN LAB


SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI ANALÝZY STABILITY

- | Technológia statického viacnásobného rozptylu svetla (SMLS)
- | 1 meracia pozícia
- | Teplotný rozsah od izbovej teploty (RT) do 60 °C na pozorovanie destabilizácie v reálnych podmienkach používania a skladovania
- | Zrýchlená detekcia destabilizácie - až 1 000-krát rýchlejšia ako pri vizuálnom pozorovaní
- | Skutočná stabilita: analýza stability vzorky bez potreby riedenia alebo mechanického namáhania v koncentráciách do 95 %
- | Kvantitatívne merania stability disperzie a trvanlivosti, rýchlosti migrácie, priemeru veľkosti častíc a ďalších parametrov
- | Hodnotenie stability jedným kliknutím pomocou indexu stability Turbiscan
- | Čítačka čiarových kódov na jednoduchú správu vzoriek
- | Pohodlné: Bezplatný licenčný softvér na viacerých počítačoch, obmedzená pracovná plocha...


ANALYZÁTOR STABILITY TURBISCAN LAB

TYPICKÉ APLIKÁCIE


Kedykoľvek pracujete so suspenziami, emulziami, koloidmi alebo penou, TURBISCAN je ideálnym pomocníkom pri charakterizácii. Sériu TURBISCAN sa používa v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad vo farmaceutickom, kozmetickom, potravinárskom a nápojovom priemysle, pri výrobe farieb a náterov, ropy a plynu, batérií, agrochemikálií, v chémii a v mnohých ďalších.

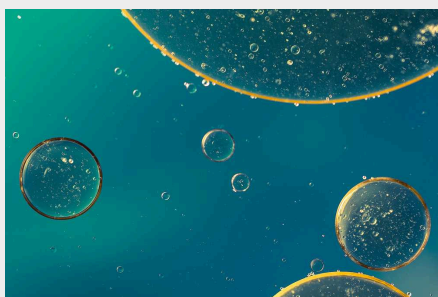

emulzie

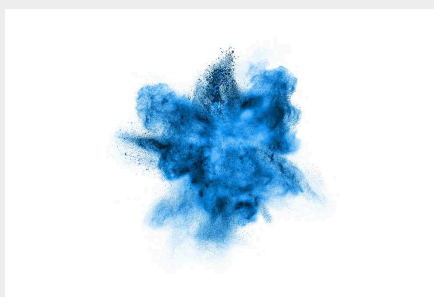

suspenzie

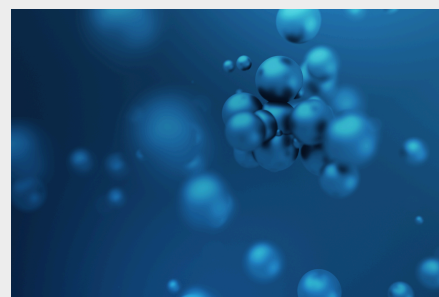

koloidy & nanočastice

- | Pleťové krémy a mlieka
- | Mliečne výrobky a nápoje, aromatické emulzie
- | Farmaceutické parenterálne a topické formy
- | Kovoobrábacie kvapaliny
- | Agrochemikálie: hnojivá, pesticídy, ...
- | Ropná emulzia

- | Farby, atramenty a nátery
- | Suspenzia liečiva a vakcíny
- | Make-up a opaľovací krém
- | Chemický a polymérny priemysel
- | Keramika a katalyzátory
- | Suspenzia do batérií
- | Elektronické suspenzie

- | Systém podávania liečiv: LNP, lipozómy, ...
 - | Výskum nanočastíc a suspenzie nanočastíc
 - | Polymérne a biopolymérne disperzie
- ... a mnoho ďalších!

PRÍKLADY APLIKÁCIÍ

RÝCHLA DETEKCIA USADENÝCH ČASTÍČ

SEDIMENTÁCIA

Technológia TURBISCAN ponúka výrazne rýchlejšiu (až 1 000-krát) a spoľahlivejšiu detekciu sedimentácie v porovnaní s vizuálnym pozorovaním. Okrem toho pozorovanie voľným okom sťažuje výpočet rýchlosti migrácie a je náchylné na chyby a nesprávnu interpretáciu. Naproti tomu technológia TURBISCAN poskytuje rýchly a nedeštruktívny spôsob zisťovania a kvantifikácie sedimentácie a veľkosti častíc v priebehu času a dokáže zistiť aj malé zmeny vo vysoko koncentrovaných vzorkách bez akéhokoľvek riedenia alebo mechanického zaťaženia. Vďaka tomu je ideálna na analýzu zložitých suspenzií a prípravkov a na získanie rýchlejšej, spoľahlivejšej a presnejšej odpovede o monitorovaní sedimentácie.



RÝCHLA DETEKCIA MIGRÁCIE KVAPIEK

KRÉMOVANIE EMULZIÍ

Pokiaľ ide o meranie migrácie kvapiek a krémovania v emulzných systémoch, technológia TURBISCAN má pre formulátorov niekoľko výhod. Na jednej strane poskytuje rýchle meranie (až 1 000-krát rýchlejšie ako vizuálne pozorovanie) natívných vzoriek a nedeštruktívny spôsob zisťovania a merania migrácie kvapiek. Na druhej strane sa dá ľahko určiť rýchlosť migrácie a pomáha formulátorovi porovnávať receptúry, takže je ideálna na analýzu komplexných emulzií so širokým rozsahom veľkostí a



koncentrácií kvapiek. Okrem toho technológia TURBISCAN poskytuje poznatky o mechanizmoch, ktoré spôsobujú migráciu kvapiek, čo možno využiť na zlepšenie formulácie a podmienok spracovania. Celkovo vedie použitie technológie TURBISCAN pri analýze emulzií k rýchlejšim, presnejším a spoľahlivejším výsledkom v porovnaní s tradičnými metódami.

UŠETRITE ČAS NA MERANIE FYZICKEJ STABILITY

ZLOŽENIE: MERANIE STABILITY A ODHAD TRVANLIVOSTI


Prístroj TURBISCAN sa vo veľkej miere používa na meranie fyzikálnej stability prípravkov a koloidných systémov. Táto technológia pomáha formulátorom šetriť čas a presne klasifikovať a kvantifikovať stabilitu vzoriek v rôznych skúškach alebo šaržiach. Uplatňuje sa na natívne vzorky, dokonca aj na veľmi vysoko koncentrované formulácie. TURBISCAN nielen šetrí čas, ale poskytuje aj rýchlosť a metriku destabilizácie, ako aj robustnú analytiku na predpovedanie doby skladovateľnosti. Technológia TURBISCAN sa riadi odporúčaniami normy ISO/TR 13097:2013 a je ideálna, pokiaľ ide o rýchle a presné meranie stability. Prestaňte hádať a rozhodujte sa na základe faktov!



ČO SA DÁ ZMERAŤ, SA DÁ AJ ZLEPŠIŤ

MAPOVANIE STABILITY: EMULZIE A SUSPENZIE

Meranie stability emulzií a prípravkov sa tradične vykonáva vizuálnym pozorovaním. Okrem toho, že vizuálna kontrola destabilizácie emulzie je zdĺhavá a únavná, zvyčajne sa končí odpoveďou vyhovet/ nevyhovet. To nie je optimálne na doladenie ideálnej koncentrácie povrchovo aktívnych látok alebo stabilizátorov, ktoré sa majú pridať na dosiahnutie

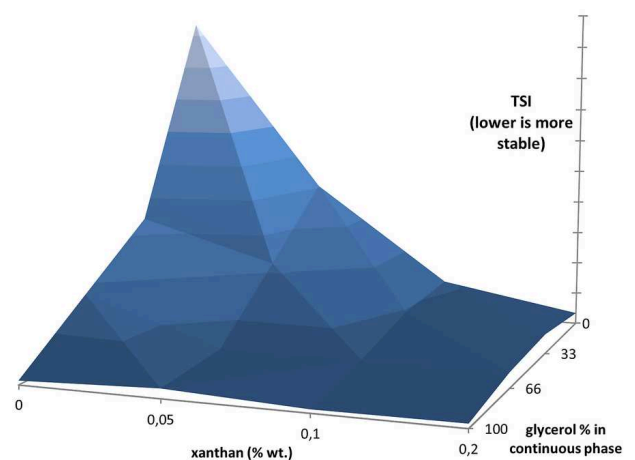

požadovanej doby skladovateľnosti. Prístroj TURBISCAN je v tomto ohľade veľkým pomocníkom; nielenže ušetrí obrovské množstvo času na zistenie destabilizácie, ale poskytuje aj hodnotu na základe nestability a hodnotí rôzne receptúry v závislosti od ich trvanlivosti. Vytvára teda objektívne a opakovateľné údaje na vytvorenie lepšieho, ekologickjšieho a bezpečnejšieho výrobku.

Príklad snímku superabsorpčných polymérov (SAP)

STABILNÉ PRODUKTY PRE BEZPEČNEJŠIE A ÚČINNEJŠIE FARMACEUTICKÉ SUSPENZIE

VAKCÍNY A PARENTERÁLNE DISPERZIE

Testovanie stability a trvanlivosti je pre farmaceutické výrobky a lieky nevyhnutné. Destabilizácia alebo nestabilita vakcín, parenterálnych disperzií alebo farmaceutických výrobkov môže mať veľký vplyv na účinnosť výrobku a v niektorých prípadoch aj na bezpečnosť pacienta. Hoci je k dispozícii mnoho techník, TURBISCAN ponúka in-situ, neriediace a nedeštruktívne merania na zistenie destabilizácie a úsporu času v nich. Poskytuje jasné, presné a objektívne meranie stability, ktoré je nevyhnutné na rýchle a správne rozhodnutia v oblasti výskumu a vývoja alebo kontroly kvality. Prístroj TURBISCAN sa intenzívne využíva na štúdium stability a schopnosti redispergovania vakcín, ako aj parenterálnych a injekčných disperzií a poskytuje vedcom hlboký prehľad o stave disperzie a jej vývoji.



HOMOGENNÉ SUSPENZIE PRE VYŠŠÍ VÝKON BATÉRIÍ

ZLEPŠENIE ÚČINNOSTI BATÉRIE

Po skladovaní energie a batériách je exponenciálny dopyt, či už na pokrytie našej potreby mobility a komunikácie, alebo na riešenie environmentálnych výziev. Lítium-iónové batérie sú najrozšírenejšou

technológiou a jedným z kľúčových krokov pri ich vývoji a výrobe je zloženie suspenzie (používanej na elektródy), ktoré zabezpečuje konečnú kvalitu batérie. Táto suspenzia je zvyčajne vysoko koncentrovaná a tmavá (v dôsledku vysokej koncentrácie sadzí) a použitie konvenčných techník rozptylu svetla na hodnotenie je náročné alebo si vyžaduje značné množstvo riedenia. Prístroj TURBISCAN sa úspešne používa na monitorovanie stability týchto suspenzií a pomáha formulátorom optimalizovať zloženie, testovať výrobu a identifikovať nové suroviny.




Ak chcete nájsť najlepšie riešenie pre vaše potreby charakterizácie častíc, navštívte našu aplikačnú databázu





VÝSLEDKY MERANIA NA PÁR KLIKNUTÍ

TURBISOFT SOFTWARE PRE TURBISCAN LAB

Zber údajov, interpretácia a export sa vykonáva pomocou TURBISOFT, špecializovaného a intuitívneho softvéru pre rad TURBISCAN. TURBISOFT bol vyvinutý pre a je neustále optimalizovaný smerom k intuitívnejšej a priamočiarejšej analýze údajov, čím šetrí čas a pomáha používateľom získať potrebné výsledky niekoľkými kliknutiami.

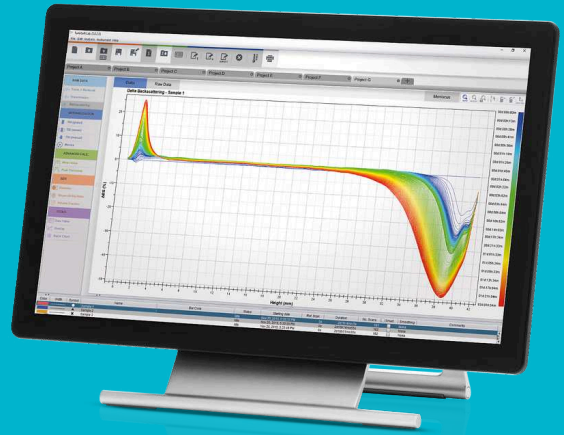

- | Intuitívna a prehľadná navigácia
- | Rýchle a spoľahlivé porovnanie stability vďaka algoritmu TSI
- | Pokročilý výpočet pre hĺbkovú analýzu údajov: rýchlosť migrácie, vývoj priemernej veľkosti častíc, separácia fáz a ďalšie
- | Buďte v obraze: bezplatná licencia - bezplatné aktualizácie softvéru
- | Potrebujete používať viacero počítačov? Tento viacpoužívateľský softvér vám pomôže
- | Export údajov je jednoduchý ako kopírovanie a vkladanie
- | Videozáznam destabilizácie vzorky až pre 6 vzoriek
- | Plne riadený postup kontroly kalibrácie
- | Viacjazyčná podpora: angličtina, španielčina, francúzština, čínština, japončina, nemčina a ďalšie

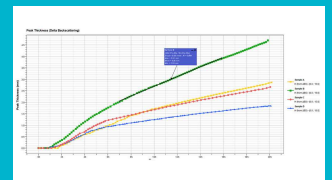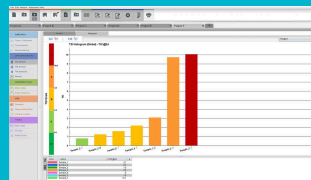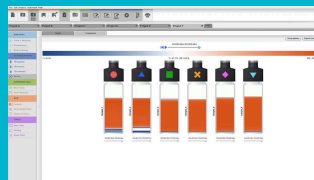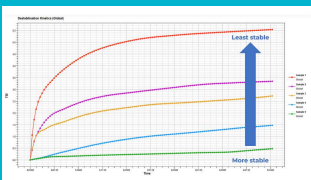

ANALYZÁTOR STABILITY TURBISCAN LAB

PRÍSLUŠENSTVO A VOLITEĽNÉ DOPLNKY

Na odber vzoriek a testovanie stability vašich výrobkov je k dispozícii niekoľko možností. Od štandardných jednorazových sklenených fľaštičiek s objemom 20 ml až po malé objemy (do 2 ml) a prispôsobenie sa vašim špecifickým potrebám (typ striekačky, vzorka s veľmi vysokou viskozitou...). Máme to pokryté!



Štandardné fľaštičky (20 ml)

Odporúčaný objem valcovitých sklenených injekčných liekoviek je približne 20 ml. Sú na jedno použitie, aby sa zabránilo chemickej alebo bakteriálnej kontaminácii a znížili sa náklady na prácu pri umývaní a sušení. Fľaštičky sú uzavreté vďaka uzáveru a jednorazovému PTFE tesneniu, ktoré zabraňuje odparovaniu v prípade zvýšenej teploty. Tieto fľaštičky sú určené na reprodukciu vášho testu vizuálnej stability.



Malý objem (4 ml)

Malý objem vzorky? Žiadny problém. K dispozícii sú fľaštičky s malým objemom a špecifický adaptér. Meranie je možné vykonať už s 2 ml. Ďalšia dobrá správa: vzorka sa dá úplne obnoviť a meranie TURBISCAN je bezkontaktné/nedeštruktívne.



Adaptéry na požiadanie (pre injekčné striekačky, tlakové fľaštičky)

Máte špeciálne požiadavky - a my máme riešenia! Náš vývojový tím miluje výzvy, a preto vám môžeme ponúknuť adaptéry na požiadanie pre prácu s veľmi špecifickými vzorkami (injekčné striekačky, fľaštičky pod tlakom atď.). Ideálne na štúdium stability v špecifických podmienkach (tlak) alebo na kontrolu kvality.



Bunky s otvoreným dnom - pre viskózne a krehké vzorky

Existujú vzorky, ktoré sa buď obtížne prenášajú, alebo sú príliš krehké na to, aby sa dali vylít - sada koringových vialok pomáha tento problém obehýť. Otvorené dno (ktoré sa ručne uzaviera zátkou) umožňuje snadné odstránenie lepkavého vzorku alebo pěny pomocí koringových vialok.



Kalibračné štandardy

Každý TURBISCAN sa dodáva so sadou štandardov na kontrolu kalibrácie prístroja. Softvér TURBISCAN, TURBISOFT, vás vedie krok za krokom a po dokončení postupu softvér vydá signál „OK“. Test a výsledky sa uložia a postup kontroly prístroja možno sledovať.



Distribúcia veľkosti častíc

Softvér TURBISIZE dokáže merať distribúciu veľkosti častíc (ISO13317) a distribúciu rýchlosti migrácie pre akékoľvek dáta získané pomocou TURBISCAN, bez potreby riedenia, prípravy alebo úpravy vzorky.

TURBISCAN LAB

TECHNICKÉ ÚDAJE

Krok akvizičného skenovania	20 µm
Automatické rozpoznávanie vzoriek (čiarový kód)	áno
Certifikát CE	áno
Rozmery	26 x 28 x 25 cm
Normy	ISO/TR 13097:2013, ISO/TR 18811:2018, ISO 13317-3:2001, ISO/TS 22107:2021, ISO/TS 21357:2022
Rozsah meranej veľkosti	10 nm - 1 mm
Wavelength	880 nm
Princíp merania	Statický viacnásobný rozptyl svetla (SMLS)
Particle size distribution	Yes (additional software required)
Počet vzoriek	1
Reprodukovateľnosť / opakovateľnosť na latexových štandardoch	0.05%
Koncentrácia vzorky	0.0001 - 95%
Objem vzorky	2 - 20 ml
Softvér	TurbiSoft Lab
Rozsah teplôt	RT - 60°C
Hmotnosť	8 kg

www.microtrac.sk/turbiscan-lab